

Onyx[®] 9500

Напалечный пульсоксиметр



Пульсоксиметрия на Вашем пальце – всегда, везде

NONIN совершил революцию в пульсоксиметрии благодаря модели ONYX. Сотни тысяч людей по всему миру доверяют модели ONYX, первому цифровому автономному напалечному пульсоксиметру. Объединяя электронику и сенсор в одном изделии, ONYX предлагает выгодное решение для периодических проверок и краткосрочного мониторинга вместе с не имеющей равных надежностью и доступным исполнением.

Onyx® 9500

Основные факты

- превосходная точность при низкой перфузии
- прочная конструкция для самой требовательной рабочей среды
- простоту в использовании гарантирует простое включение нажатием ON/OFF
- эффективность: 1600 включений; 18 часов непрерывной работы -
- универсальность: соответствует широчайшему перечню размеров пальцев как детей так и взрослых

Портативность и функциональность ONYX делает его ценным инструментом в любой ситуации, когда требуется быстрая и точная оценка сатурации и пульса. Вам больше не придется искать подходящий пульсоксиметр..

Маленький и легкий

Носите ONYX где угодно – на шнурке, в коробочке или кармане. Весит менее 60 грамм.

Большой яркий LED-дисплей

Сатурация и пульс определяются под любым углом, днем и ночью.

Индикатор точности пульса

LED обеспечивает быструю и точную оценку данных при считывании с пациента.

Размеры пальцев от детских до взрослых

Соответствует широкому перечню размеров пальцев как детей так и взрослых с толщиной от 8мм до 26мм.

Автоматическое включение/выключение

Автоматическое включение/выключение после размещения пальца в пульсоксиметре.

Энергоэффективность

Функционирует с помощью двух алкалиновых батареек типа AAA, которых хватает на 1600 включений или 18 часов непрерывной работы.




Прочность и надежность

Достаточно прочный для использования в самых требовательных ситуациях. Прошел сертификацию для использования на вертолетах.



Кейсы для ношения

Опционально предлагается либо мягкий кейс, либо жесткий защитный.

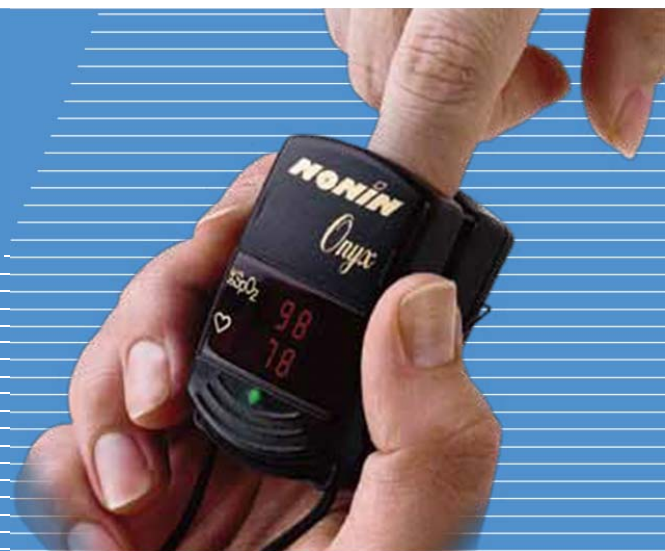

Спецификация

Габариты(ДхШхВ)5,84x3,48x3,23(см)

Гарантия.....2 года

Отображаемый диапазон сатурации.....0-100%

Отображаемый диапазон пульса.....18-321 уд/мин

Диапазон декларируемой точности сатурации(Arms*).....±2 цифры при SpO2 70-100%

Диапазон декларируемой точности сатурации при низкой перфузии(Arms*).....±2 цифры при SpO2 70-100%

Диапазон декларируемой точности пульса(Arms*).....20-250 уд/мин±3 цифры

Диапазон декларируемой точности пульса при низкой перфузии(Arms*).....40-240 уд/мин±3 цифры

Длины волн измерения и выходная мощность**

Красный.....660 нм @ 0.8 модулированной волны в среднем

Инфракрасный.....910 нм @ 1.2 модулированной волны в среднем

Температура окружающей среды

При использовании.....от 0°C до 40°C

Хранение/транспортировка.....от -30°C до 50°C

Влажность

При использовании.....от 10% до 90% не конденсируется

Хранение/транспортировка.....от 10% до 95% не конденсируется

Высота над уровнем моря

При использовании.....до 12192 метров

Гипербарическое давление.....до 4 атмосфер

Продолжительность работы батареи

Непрерывная работа - около 1600 включений, 18 часов работы, 2 алкалиновых батарейки AAA, из расчета 40 секунд на одно включение
Хранение.....обычно 9 месяцев, используя 2 алкалиновых батарейки AAA

Степень защиты IEC 60601-1 / CSA 601.1 / UL 60601-1:

Степень защиты.....типа BF-рабочая часть изделия

Тип использования.....продолжительный

Степень защиты от брызг.....IPX2

Продукт соответствует стандарту ISO 10993-1

*±1 Arms представляет примерно 68% измерений

** Информация особенно ценна для клиницистов, использующих фотодинамическую терапию

Актимед плюс

194291, пр. Луначарского, д.43

г. Санкт-Петербург, Россия

Тел.+7(812)7035071

Факс+7(812)7035071 e-mail info@aktimed.ru

Nonin Medical, Inc.

13700 1st Avenue North

Plymouth, MN 55441-5443 USA

P +1.763.553.9968 TF 800.356.8874

F +1.763.577.5521 E info@nonin.com

www.nonin.com

Nonin Medical AB

Fibervägen 2, 82450

Hudiksvall, Sweden

P +46 650 401500

F +46 650 401514

E infointl@nonin.se